

39 174

**ADE**  
germany

Modell Felicitas / BM 702  
Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

1. Anwendungsbedingungen.....	Seite 2
2. Inbetriebnahme.....	Seite 2
3. Wiegefunktion.....	Seite 3
4. Technische Daten.....	Seite 3
5. Garantie.....	Seite 3

39 174

**ADE**  
germany

Modell Felicitas / BM 702  
Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

1. Anwendungsbedingungen.....	Seite 2
2. Inbetriebnahme.....	Seite 2
3. Wiegefunktion.....	Seite 3
4. Technische Daten.....	Seite 3
5. Garantie.....	Seite 3

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieser qualitativ hochwertigen Personenwaage entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren sie dann gut auf, damit Ihnen diese Informationen bei Bedarf immer wieder zur Verfügung stehen.

## 1. Anwendungsbedingungen

Sie sollten sich möglichst unbedeutet wiegen. Es sollte darauf geachtet werden, dass das Wiegen immer zur gleichen Tageszeit durchgeführt wird. Da der Körper natürlichen Schwankungen unterworfen ist (z.B. durch Entwässerung beim Sport oder nach einem Saunabesuch, Nahrungs- oder Flüssigkeitszufuhr) gilt es, beim Wiegen möglichst konstante Bedingungen einzuhalten, um die Werte vergleichbar zu machen.


Die Firma ADE Germany übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, welche durch die Badezimmerwaage verursacht werden, noch Forderungen Dritter. Dieses Produkt ist ausschließlich zum privaten Gebrauch bestimmt. Es ist nicht für den professionellen Einsatz in Krankenhäusern oder medizinischen Einrichtungen ausgelegt.

## 2. Inbetriebnahme

Bevor die Waage zum ersten Mal in Betrieb genommen wird, sollte zunächst sorgfältig geprüft werden, ob an der Verpackung oder am Gerät Schäden zu erkennen sind. Die Waage darf auf keinen Fall benutzt werden, wenn sie beschädigt ist. In diesem Fall bitte umgehend an uns werden, unsere Mitarbeiter helfen gerne weiter.

### Sicherheitshinweise:

Die bestimmungsgemäße Verwendung dieses Geräts ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis, außer sie werden von Personen, welche für ihre Sicherheit verantwortlich sind betreut, oder im Gebrauch der Waage unterwiesen. Es sollte sichergestellt werden, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

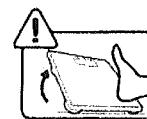

Stellen Sie die Waage auf einen ebenen und festen Untergrund (Fliesen, Parkett, usw.). Auf Teppichböden können Fehlmessungen auftreten.



Stellen Sie sich immer mittig auf die Waage um zu verhindern, dass die Waage umkippt.



Achtung! Es besteht Rutschgefahr bei nasser Oberfläche der Waage oder bei nassen Füßen. Bitte achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf die Waagen fallen, da sie ansonsten Schaden nehmen könnte.



Reinigen Sie die Waage nur mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel. Nicht unter Wasser tauchen.

## 3. Wiegefunktion

Stellen Sie sich mittig auf die Waage. Bleiben Sie ruhig stehen und halten Sie sich nicht fest. Auf der Anzeigeskala wird Ihnen Ihr Gewicht angezeigt.

## 4. Technische Daten

Tragkraft x Teilung: Max. 160 kg x 1000 g  
Abmessungen: 275 mm x 345 mm x 113 mm

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten

## 5. Garantie

ADE garantiert für 3 Jahre ab Kaufdatum die kostenfreie Behebung von Mängeln aufgrund Material- oder Fabrikationsfehlern durch Reparatur oder Austausch. Bitte bei Kauf Garantieabschnitt vom Händler ausfüllen und stempeln lassen. Im Garantiefall bitte Waage, mit Garantieabschnitt unter Angabe des Reklamationsgrundes, an Ihren Händler zurückgeben.

Mit freundlichen Grüßen

ADE (GmbH & Co.)



-----  
**Garantieabschnitt – 3 Jahre auf die Mechanische Personenwaage**

• Absender

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

• Reklamationsgrund

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

• Kaufdatum

Bitte diesen Abschnitt inkl. Kaufbeleg an ihren Fachhändler zurück senden.